Физический факультет

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.8

"Определение коэффициента вязкости воздуха методом капилляра"

Группа: Z3144

Студент: Евгений Турчанин

1 Цели работы

- 1. Экспериментальная проверка закономерностей движения физического маятника.
- 2. Определение вязкости воздуха при комнатной температуре.

2 Задачи

Получить зависимость изменения давления в сосуде с течением времени.

3 Теоретическое введение

Вязкость (внутреннее трение) — свойство газов и жидкостей (текучих сред) сопротивляться перемещению одной их части относительно другой. Вязкость проявляется в возникновении сил внутреннего трения между слоями среды, движущимися друг относительно друга или относительно поверхности твердого тела. Явление вязкости — одно из явлений переноса, поскольку действующие между слоями силы приводят к переносу импульса между слоями среды. На микроскопическом уровне возникновение силы внутреннего трения обусловлено двумя процессами: во-первых, молекулы, переходя из одного слоя в другой, переносят средний импульс своего слоя в соседний, во-вторых, на границе между слоями происходит взаимное выравнивание импульсов молекул за счет сил межмолекулярного взаимодействия. Первый механизм передачи импульса преобладает в разреженных газах, второй — в жидкостях.

Рассмотрим течение среды в направлении оси Ox (см. Рис. 1) такое, что скорость слоев уменьшается в направлении оси Oy. На границе ab между двумя слоями, происходит перенос проекции импульса частиц среды в направлении оси Oy. С макроскопической точки зрения это означает, что на границе слоёв возникает сила трения F, стремящаяся затормозить верхний, более быстрый, слой и ускорить нижний, более медленный. Эта сила называется силой вязкого (или внутреннего) трения.

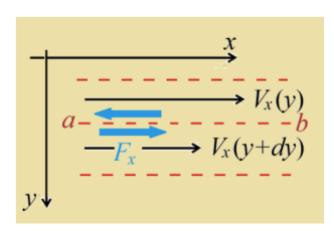


Рис. 1: На границе ab между соседними слоями, имеющими разную скорость, действует сила F_x внутреннего трения.

Для многих сред величина силы внутреннего трения F_x , действующая на участке площадью границы между слоями, пропорциональна площади участка и градиенту скорости слоев. В этом случае на слой, лежащий ниже границы ab на рисунке 1, действует сила

$$F_x = -\eta \frac{\mathrm{d}V_x}{\mathrm{d}y} \Delta S \tag{1}$$

На слой, лежащий выше границы, действует такая же по модулю сила, но направленная противоположно. Коэффициент пропорциональности в формуле (1) называется коэффициентом динамической вязкости. Этот коэффициент численно равен модулю силы, действующей на единицу площади поверхности каждого из взаимодействующих

слоёв, при градиенте скорости, численно равном единице. В системе СИ коэффициент динамической вязкости измеряется в · . Закон вязкого тре-

ния (1) был установлен Ньютоном и носит его имя, а среда, в которой он выполняется, называются ньютоновской жидкостью. Примерами ньютоновской жидкости являются все низкомолекулярные вещества в жидком состоянии и их гомогенные смеси. Закону (1) подчиняется и течение не сильно разреженных газов

Принято подразделять течение по его характеру на ламинарное и турбулентное. Ламинарным называется такое течение, при котором микрообъемы (частицы) среды движутся по устойчивым траекториям и среду можно рассматривать как набор слоев движущихся с разными скоростями. Турбулентным (вихревым) течением называется такое, при котором движение частиц среды становится неустойчивым и хаотичным. Такое течение сопровождается перемешиванием и пульсациями скорости и давления. Для потока с заданными геометрическими границами по мере достижения достаточно больших скоростей ламинарное течение переходит в турбулентное (см. Приложение 1)

При стационарном ламинарном течении ньютоновской несжимаемой жидкости по длинной трубке круглого сечения в ней почти на всём протяжении за исключением небольших областей вблизи концов устанавливается параболическое распределение скоростей (см. Рис. 2):

$$v(r) = v_0(1 - r^2/R^2), (2)$$

где v(r) – скорость движения жидкости на расстоянии r от оси трубки; v_0 – скорость на оси трубки; R – радиус трубки.

При этом объем жидкости, проходящий в единицу времени через сечение трубки подчиняется формуле Пуазейля:

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi R^4}{8\eta l} (P_1 - P_2),\tag{3}$$

Здесь $\mathrm{d}V$ – объем жидкости, проходящей через сечение трубки за время $\mathrm{d}V$; R – радиус трубки; $P_1,\,P_2$ давления в двух сечениях

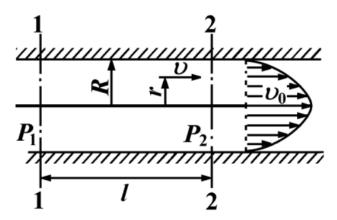


Рис. 2: Распределение скорости жидкости в сечении круглой трубки при ламинарном течении. В соответствии с формулой Пуазейля (2) объем жидкости протекающей в единицу времени через сечение трубки определяется отношением разности давлений P_1 и P_2 в двух сечениях к расстоянию l между сечениями.

трубки, находящихся друг от друга на расстоянии l.

В лабораторной работе изучается процесс вытекания воздуха в атмосферу из большого сосуда (см Рис. 4) через капилляр – длинную трубку с малым внутренним диаметром (d < 1 мм). В сосуде с помощью насоса создается избыточное по отношению к атмосфере давление. После отключения насоса по мере вытекания воздуха давление в сосуде падает. Быстрота вытекания воздуха и зависимость давления в сосуде от времени зависят от атмосферного давления P_a , объема сосуда V_c , радиуса R капилляра, его длины L и вязкости воздуха η . Измерение зависимости давления в сосуде $P_c(t)$ от времени позволяет по известным параметрам установки вычислить вязкость воздуха.

Формула (3) выводится в предположении, что среда, текущая

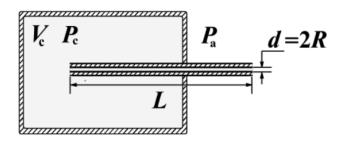


Рис. 3: Основная часть лабораторной установки – сосуд достаточно большого объема V_c , в котором создается давление P_c больше, чем давление P_a в окружающей атмосфере и тонкий капилляр длиной L и радиусом R, соединяющий сосуд с атмосферой.

по трубке не сжимаема и имеет плотность, независящую от давления. При течении газа вместе с изменением давления будет меняться и его плотность, поэтому формула, строго говоря, будет справедлива только для небольших расстояний l, на которых давление и плотность будут меняться незначительно. Если в качестве такого расстояния взять бесконечно малое смещение $\mathrm{d}x$ вдоль трубки, то формула (3) преобразуется к виду

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{P(x) - P(x + \mathrm{d}x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x},\tag{4}$$

где P(x) - давление в точке с координатой x. Перейдем в этом уравнении от прошедшнего объема $\mathrm{d}V$ к перенесенной массе $\mathrm{d}m$:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{p\,\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\frac{\pi R^4 \rho}{8\eta} \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t},\tag{5}$$

где ρ - плотность газа.

В лабораторной работе изучается течение воздуха при давлениях на несколько десятков процентов превышающих атмосферное. При таких давлениях воздух ведет себя как идеальный газ, и в состоянии термодинамического равновесия при температуре T для массы m газа выполняется уравнение Менделеева-Клапейрона:

$$PV = \frac{m}{M}RT,\tag{6}$$

где V - объём, занимаемый газом, M - молярная масса газа, R - универсальная газовая постоянная. Плотность газа ρ в соответствии с этим уравнением выражается через параметры состояния газа следующим образом

$$\rho = \frac{PM}{RT},\tag{7}$$

При дальнейшем рассмотрении будем полагать, что течение газа происходит достаточно медленно, чтобы формула (7) выполнялась в каждом сечении капилляра, и уравнение Менделеев-Клапейрона (6) было справедливо для газа в сосуде в каждый момент времени. Кроме того будем считать температуру газа постоянной. Тогда плотность газа по уравнению (7) будет пропорциональна давлению.

Теоретически вязкость η идеального газа определяется соотношением

$$\eta = \frac{1}{3} V_{\rm cp} \lambda \rho,\tag{8}$$

где $V_{\rm cp}$ - средняя арифметическая скорость молекул газа; λ - средняя длина свободного пробега молекул. Средняя скорость молекул зависит только от температуры газа:

$$V_{\rm cp} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}},\tag{9}$$

и при постоянной температуре не зависит от плотности газа. Средняя длина свободного пробега молекул газа определяется концентрации молекул n:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi}d^2n},\tag{10}$$

и, поскольку концентрация связана с плотностью соотношением: $n=\rho/m_0$, где m_0 - масса одной молекулы, из формулы (10) следует, что средняя длина свободного пробега зависит от плотности обратно

пропорционально. Таким образом, при постоянной температуре в формуле вязкости (8) множитель $V_{\rm cp}$ не зависит от плотности, множитель λ изменяется обратно пропорционально плотности. Следовательно, сама вязкость не зависит от плотности.

При стационарном течении газа по капилляру масса, переносимая в единицу времени через каждое сечение капилляра должна быть одинакова, т. е. поток массы $dm\ dt = const$ на всем протяжении капилляра. При этом из-за независимости вязкости от плотности из формулы (5) следует, что на всем протяжении капилляра $\frac{dP}{dt} \sim \frac{1}{\rho}$, или с учетом соотношения (7)

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} \sim \frac{1}{P} \tag{11}$$

Обозначив коэффициент пропорциональности в этой формуле K, запишем формулу (11) в виде

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = \frac{K}{P}P\,\mathrm{d}P = K\,\mathrm{d}x\tag{12}$$

Чтобы найти выражение для коэффициента K, проинтегрируем второе уравнение (12) от координаты x_0 начала капилляра до координаты $x_1 = x_0 + L$ конца капилляра (см. Рис. 4). Учитывая, что давление $P(x_0)$ на входе капилляра равно давлению P_c в сосуде, а давление на выходе капилляра $P(x_1)$ равно атмосферному давлению P_a в результате интегрирования получим

$$\frac{1}{2} \left(P_a^2 - P_c^2 \right) = KL \tag{13}$$

Отсюда

$$K = -\frac{(P_c^2 - P_a^2)}{2L} \tag{14}$$

Используя написанное выше, найдем соотношение между быстротой изменения давления в сосуде $\frac{\mathrm{d}P_c}{\mathrm{d}t}$ и текущим значением P_c этого давления. Пусть из сосуда за время $\mathrm{d}t$ выходит масса $\mathrm{d}m$. При этом давление газа в соответствие с уравнением (6) изменяется на $\mathrm{d}P_c = -\mathrm{d}mRT/(V_cM)$, следовательно:

$$\frac{\mathrm{d}P_c}{\mathrm{d}t} = -\frac{RT}{V_c M} \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \tag{15}$$

Подставим сюда выражение (4), в котором используем первую формулу (11), выражение (6) для плотности и выражение (14) для коэффициента *K*. В итоге получим следующее соотношение:

$$\frac{\mathrm{d}P_c}{\mathrm{d}t} = -\alpha(P_c^2 - P_a^2) \tag{16}$$

Коэффициент в этом уравнении зависит от вязкости газа и параметров установки:

$$\alpha = \frac{\pi R^4}{16nV_c L} \tag{17}$$

Разделив переменные в уравнении (16) получим:

$$\frac{\mathrm{d}P_c}{(P_c^2 - P_a^2)} = -\alpha \,\mathrm{d}t\tag{18}$$

Интегрирование этого уравнения от начального (при t=0) значения давления P_{c0} до значения P_c в некоторый момент времени t дает:

$$\frac{1}{2P_a} \left[\ln \left(\frac{P_c - P_a}{P_c + P_a} \right) - \ln \left(\frac{P_{c0 - P_a}}{P_{c0} + P_a} \right) \right] = -\alpha t \tag{19}$$

Введем следующие обозначения:

$$X = \ln\left(\frac{P_c - P_a}{P_c + P_a}\right); \ X_0 = \ln\left(\frac{P_{c0} - P_a}{P_{c0} + P_a}\right); \ C = 2P_a\alpha$$
 (20)

И перепишем уравнение (19) в виде

$$X = X_0 - Ct \tag{21}$$

Как видим, зависимость величины X от времени линейная с коэффициентом наклона C' В лабораторной работе измеряется зависимость $P_c(t)$ давления в сосуде от времени. С помощью первой формулы (20) для каждого значения давления P_c вычисляется величина X, тем самым находится

зависимость X(t). На основе зависимости X(t) определяется коэффициент C и по его значению вычисляется вязкость воздуха. Чтобы получить окончательное выражение для вязкости, подставим выражение α из формулы (17) в определение коэффициента C (последняя формула (20)) и разрешим получившееся уравнение относительно вязкости. Таким образом

$$\eta = \frac{\pi R^4 P_a}{8V_c LC} \tag{22}$$

Используемый в работе сосуд имеет цилиндрическую форму и для определения его объема измеряются его высота H_c и диаметр основания D_c ,по которым вычисляется его объем:

$$V_c = \frac{1}{4}\pi D_c^2 H_C \tag{23}$$

4 Экспериментальная установка

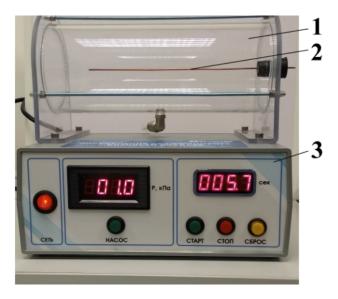


Рис. 4: Экспериментальная установка

- 1. Сосуд, в котором создается избыточное давление.
- 2. Капилляр, соединяющий сосуд с атмосферой.
- 3. Лицевая панель стенда Назначение кнопок и индикаторов, расположенных на лицевой панели следующее: «СЕТЬ» кнопка включения электрического питания стенда; «Р, кПа» индикатор значения $\Delta P = P_c P_a$, разности давлений в сосуде и в окружающей атмосфере ; «НАСОС» кнопка, при нажатом состоянии которой встроенный насос нагнетает воздух в сосуд; «сек» индикатор показаний встроенного секундомера; «СТАРТ», «СТОП», «СБРОС» кнопки запуска, останова и сброса показаний встроенного секундомера, соответственно

5 Обработка результатов